

PureWhite

Clareador Dental / Blanqueador Dental / Dental Bleaching Peróxido de Hidrogênio / Peróxido de Hidrógeno / Hydrogen Peroxyde

35%

Pure White é um sistema de clareamento dental profissional à base de Peróxido de Hidrogênio 35% para clareamento de dentes vitais e não-vitais, de uso exclusivo em consultório odontológico. Deve sempre ser utilizado com um eficiente sistema de isolamento para a proteção gengival (Gingi Dam - Barreira Gengival Fotopolimerizável). Após a mistura homogênea das duas fases, ocorre a formação de um gel à base de Peróxido de Hidrogênio a 35%, com pH na faixa 6,0 a 7,0. O pH neutro evita e diminui efeitos na estrutura dental, além disso o Pure White contém agentes dessensibilizantes em sua fórmula que maximizam o conforto do paciente.

INDICAÇÃO DE USO

É indicado para dentes vitais e não vitais com alterações de cor extrínsecas de caráter crônico, não passíveis de remoção por procedimentos convencionais de uso exclusivo em consultório odontológico. Podendo ser utilizado com fontes de energia luminosa de cor azul para auxiliar na aceleração da reação do processo do clareamento dental.

INSTRUÇÕES PARA USO

Realize a limpeza dos dentes, após isto registre a cor inicial através de escala da Vita ou fotografia; Seque bem os dentes e realize um cuidadoso isolamento relativo com **Gingi Dam** - Barreira Gengival Fotopolimerizável contornando o tecido gengival e fotopolimerize por 10 segundos cada dente a ser clareado;

Conecte as duas seringas do Kit do Clareador Dental Pure White, após o acoplamento completo e seguro misture empurrando os êmbolos alternadamente por até 10 vezes ou até apresentar uma mistura homogênea, abaixo explicação do sistema de automistura:

Sistema de Automistura:

O sistema de automistura é utilizado para facilitar a mistura do peróxido com o espessante, onde são utilizadas duas seringas conectadas por um sistema que permite que o gel passe de uma seringa para a outra efetivando a mistura das duas fases. Após a mistura deve-se colocar o gel misturado em apenas uma seringa e utilizar. A Figura 01 apresenta uma ilustração do funcionamento de automistura.

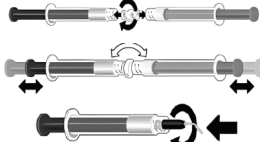


Figura 01 – Ilustração do funcionamento da Automistura.

- Conecte a ponta aplicadora na seringa e inicie a aplicação do gel clareador já misturado em toda a face vestibular e proximais de cada dente a ser clareado. A camada de gel deverá ter 1mm de espessura;
- O gel clareador misturado deverá permanecer sobre os dentes até 45 minutos. Necessitando liberar eventuais bolhas de oxigênio utilize um pincel descartável. Caso o paciente relate sensibilidade remova o produto e avalie o motivo (trinca, infiltração, dentina exposta, etc);
- Após 45 minutos remova o gel clareador aspirando com uma ponta sugadora apropriada e lave abundantemente com água;
- Remova o Gingi Dam - Barreira Gengival Fotopolimerizável destacando com sonda exploradora. Aplique o dessensibilizante

PRECAUÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Promover uma anamnese detalhada do paciente antes de iniciar o tratamento; Manipular o produto apenas em um consultório odontológico, utilizando luvas e óculos de proteção; Evitar o contato do gel com tecidos moles e gengiva; O produto não é recomendado para pessoas que tenham feito recentemente cirurgia de gengiva ou com inflamação do tecido gengival e pessoas com alergia a qualquer um de seus componentes.

Não é recomendado o uso durante a gravidez, lactação e menos de 15 anos.

Produto de uso exclusivo em consultório odontológico sob supervisão de um profissional; Produto não estéril;

Ler as instruções de uso antes de utilizar o produto;

Não ingerir e evitar o contato com a pele, tecidos mole orais, e olhos;

Recomenda-se que o paciente utilize óculos de proteção.

EFEITOS COLATERAIS

A ingestão de grandes quantidades do produto pode causar náuseas;

Antes do início do tratamento, informe seu paciente sobre a possibilidade de ocorrer sensibilidade dental. Normalmente é comum ocorrer sensibilidade dental durante o tratamento do clareamento. Neste caso, se persistir a sensibilidade trate os dentes com o Sensis 2% - Gel Dessensibilizante Dental que é indicado para sensibilidade moderada a alta;

Suspender o uso do produto em caso de reações alérgicas.

COMPOSIÇÃO

Clareador Dental Pure White – Peróxido de hidrogênio, Estabilizante, Agente Neutralizante, Espessante, Agentes Dessensibilizantes, Estruturante, Conservantes, Pigmento azul, Enzima e Água deionizada.

GINGI DAM – Barreira Gengival - HEMA, UDMA, fotoiniciadores, carga inerte e corante.

ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem sempre fechada;

Proteger da incidência da luz solar direta;

Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 28°C e não congelar o produto ou deixar exposto a altas temperaturas.

CONTEÚDO:

- 1 Seringa de Peróxido de Hidrogênio com 1,2g
- 1 Seringa de Espessante com 0,4g
- 1 Seringa com Gingi Dam (barreira gengival) 1g
- 1 Conector para seringas

VALIDADE: 24 MESES.



+55 (47) 98882-8351
fabrica@villevie.com
www.villevie.com

DENTALVIGIL DO BRASIL LDA - CNPJ: 01.101.363/0001-86
Rua Adm. Miguel Cercal, 645 - Nova Brasília-Joinville-SC 89214-610
Resp. Técnico: Aldo Castellani - CRQ-SC 13.400.397 13°R
Reg. ANVISA: 10344119007
Fone: +55 (47) 3454-2200
Indústria Brasileira

Pure White é um sistema profissional de branqueamento dental a base de Peróxido de Hidrogênio ao 35%, indicado para o branqueamento de dentes vitais e no vitais. Su uso está restringido exclusivamente a consultórios odontológicos. Debe aplicar-se sempre junto com um sistema eficaz de isolamento gengival, como Gingi Dam - Barreira Gengival Fotopolimerizável, para proteger los tejidos blandos. Después de la mezcla homogénea de las dos fases, se forma un gel con Peróxido de Hidrógeno al 35%, con un pH entre 6,0 y 7,0. El pH neutro reduce los efectos sobre la estructura dental. Además, Pure White contiene agentes desensibilizantes en su fórmula, lo que proporciona mayor confort al paciente.

INDICACIÓN DE USO

Está indicado para dientes vitales y no vitales con alteraciones de color extrínsecas crónicas, que no pueden ser eliminadas mediante procedimientos convencionales. Su uso es exclusivo en consultorio dental. Puede utilizarse en conjunto con fuentes de luz azul para ayudar a acelerar la reacción del proceso de blanqueamiento dental.

INSTRUCCIONES DE USO

Realizar la limpieza de los dientes y registrar el color inicial utilizando una guía de color Vita o por medio de fotografía.

Secar bien los dientes y realizar un aislamiento relativo cuidadoso con Gingi Dam - Barrera Gengival Fotopolimerizable, contorneando el tejido gingival. Fotopolimerizar durante 10 segundos por diente a blanquear.

Conectar las dos jeringas del Kit de Blanqueamiento Dental Pure White. La vez que estén completamente acopladas, mezclar empujando los émbolos de manera alternada por al menos 10 veces o hasta obtener una mezcla homogénea.

Sistema de Automezcla:

El sistema de automezcla permite combinar fácilmente el peróxido con el agente espesante. Para ello, se conectan dos jeringas mediante un adaptador que permite el paso del gel de una a otra, garantizando una mezcla eficaz de ambas fases. Después de mezclar, el gel debe transferirse a una sola jeringa para su aplicación.

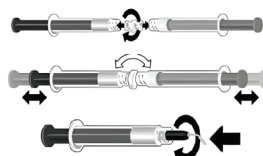


Figura 01: Ilustración del funcionamiento del sistema de automezcla.
- Conecte la punta aplicadora a la jeringa y inicie la aplicación del gel blanqueador ya mezclado sobre toda la superficie vestibular y proximales de cada diente a tratar. La capa de gel debe tener aproximadamente 1mm de espesor.

- El gel debe permanecer sobre los dientes por hasta 45 minutos. Si se forman burbujas de oxígeno, utilice un pincel desechable para liberarlas. Si el paciente presenta sensibilidad, retire el producto y evalúe la causa (fisura, filtración, dentina expuesta, etc.).

- Tras 45 minutos, retire el gel utilizando una cánula de aspiración adecuada y luego enjuague abundantemente con agua.

- Retire el Gingi Dam - Barrera Gengival Fotopolimerizable levantándolo cuidadosamente con una sonda exploradora. Aplique el gel desensibilizante dental - Sensis al 2% durante 10 minutos.

Continúa...

PureWhite[★]

Clareador Dental / Blanqueador Dental / Dental Bleaching Peróxido de Hidrogênio / Peróxido de Hidrógeno / Hydrogen Peroxide **35%**

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Realizar una anamnesis detallada del paciente antes del tratamiento; Manipular el producto exclusivamente en consultorio odontológico, usando guantes y gafas de protección;
Evitar el contacto del gel con tejidos blandos y encía;
El producto no está recomendado para personas que hayan sido sometidas recientemente a cirugía gingival, que presenten inflamación gingival o que tengan alergia a cualquiera de los componentes;
No utilizar en mujeres embarazadas, en período de lactancia ni en menores de 15 años;
Producto de uso exclusivo bajo la supervisión de un profesional odontológico;
Producto no estéril;
Leer las instrucciones antes de su uso; No ingerir, evitar el contacto con piel, tejidos blandos orales y ojos;
Se recomienda que el paciente utilice gafas de protección durante la aplicación.

EFFECTOS ADVERSOS

La ingestión de grandes cantidades del producto puede causar náuseas;
Antes de iniciar el tratamiento, informe al paciente sobre la posible aparición de sensibilidad dental, que es común durante el procedimiento. En caso de sensibilidad persistente, tratar los dientes con Sensis al 2% – Gel Desensibilizante Dental, indicado para sensibilidad de moderada a alta;
Suspender el uso del producto en caso de reacciones alérgicas.

COMPOSICIÓN

Blanqueador Dental Pure White: Peróxido de hidrógeno, Estabilizante, Agente neutralizante, Espesante, Agentes desensibilizantes, Estructurante, Conservantes, Pigmento azul, Enzima y Agua desionizada.

GINGI DAM – Barrera Gingival: HEMA, UDMA, fotoiniciadores, carga inerte y colorante.

ALMACENAMIENTO

Mantener el producto siempre en su envase cerrado;
Proteger de la luz solar directa;
Almacenar entre 5°C y 28°C.
No congelar ni exponer a temperaturas elevadas.

CONTENIDO:

1 jeringa de Peróxido de Hidrógeno con 1,2g
1 jeringa de Espesante con 0,4g
1 jeringa con Gingi Dam (barrera gingival) 1g
1 conector para jeringas

VALIDEZ: 24 meses.

Pure White is a professional dental whitening system containing 35% hydrogen peroxide, indicated for the whitening of vital and non-vital teeth. This product is intended for in-office use only under the supervision of a licensed dental professional. It must always be used with an effective gingival isolation system such as Gingi Dam – Light-Cured Gingival Barrier to protect soft tissues. After thorough mixing of both phases, a hydrogen peroxide-based gel is formed with a neutral pH (6.0 to 7.0). The neutral pH minimizes effects on dental structures. Additionally, Pure White contains desensitizing agents in its formula to enhance patient comfort during treatment.

INDICATIONS FOR USE

Indicated for the treatment of chronic extrinsic discoloration of vital and non-vital teeth, which cannot be removed by conventional cleaning procedures. May be used in conjunction with blue light sources to assist in the acceleration of the whitening process.

DIRECTIONS FOR USE

Clean the teeth thoroughly and record the initial shade using a VITA shade guide or clinical photographs.
Dry the teeth completely and perform careful relative isolation using Gingi Dam – Light-Cured Gingival Barrier, carefully outlining the gingival tissues. Light cure each tooth for 10 seconds.
Connect the two syringes from the Pure White kit. Once securely attached, mix by alternately pushing the plungers at least 10 times or until a homogeneous gel is formed.

Self-Mixing System: The self-mixing system simplifies the combination of the peroxide with the thickening agent. The two syringes are connected by a system that allows the material to pass back and forth between them, effectively blending both phases. After mixing, transfer the gel into a single syringe for application.

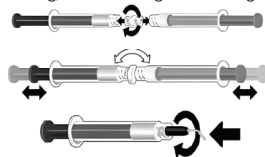


Figure 01 – Illustration of the Self-Mixing System.

Once the gel is prepared, remove the connector and attach the applicator tip to the syringe.

GEL APPLICATION PROTOCOL

- Apply the mixed whitening gel to the entire buccal and proximal surfaces of each tooth to be whitened. The gel layer should be approximately 1 mm thick.
- Leave the gel in contact with the teeth for up to 45 minutes. If oxygen bubbles appear, release them using a disposable brush.
- If the patient reports sensitivity, remove the product immediately and assess the cause (e.g., cracks, microleakage, exposed dentin).
- After 45 minutes, suction the gel using an appropriate aspirator tip and rinse thoroughly with water. Remove the Gingi Dam using an explorer, carefully detaching it from the tissue. Apply Sensis 2% Desensitizing Gel for 10 minutes.

PRECAUTIONS AND CONTRAINDICATIONS

Conduct a detailed patient anamnesis before treatment;
Use only in dental offices with appropriate personal protective equipment (PPE) including gloves and safety goggles;
Avoid contact of the gel with soft tissues and gingiva;
Not recommended for patients who have recently undergone gingival surgery, present gingival inflammation, or are allergic to any of the product's components;
Contraindicated during pregnancy, breastfeeding, and in patients under 15 years of age;
For professional use only by licensed dental personnel;
This product is non-sterile;
Read instructions carefully before use;
Do not ingest. Avoid contact with skin, oral soft tissues, and eyes;
Patients are advised to wear protective eyewear during treatment.

ADVERSE EFFECTS

Ingestion of large quantities may cause nausea; Inform patients about the possibility of temporary tooth sensitivity, which is common during whitening procedures. If sensitivity persists, treat affected teeth with Sensis 2% – Desensitizing Gel, which is indicated for moderate to high sensitivity. Discontinue use if any allergic reaction occurs.

COMPOSITION

Pure White Whitening Gel: Hydrogen peroxide, stabilizer, neutralizing agent, thickener, desensitizing agents, structuring agent, preservatives, blue pigment, enzyme, and deionized water.
Gingi Dam – Gingival Barrier: HEMA, UDMA, photoinitiators, inert filler, and pigment.

STORAGE CONDITIONS

Keep the product in its original, tightly sealed packaging;
Protect from direct sunlight;
Store between 5°C and 28°C (41°F–82°F);
Do not freeze or expose to excessive heat.

Contents:

1 syringe of Hydrogen Peroxide with 1.2g
1 syringe of Thickener with 0.4g
1 syringe with Gingi Dam (gingival barrier) 1g
1 syringe connector

Shelf Life: 24 months.

  +55 (47) 98882-8351
fabrica@villevie.com www.villevie.com
Fabricante:
DENTALVILLE DO BRASIL LDA - CNPJ: 01.101.363/0001-86
Rua Adv. Miguel Ceral, 645 - Nova Brasília-Joinville-SC 89214-610
Resp. Técnico: Aldo Castellani - CRO-SC 13.400.397 13°R
Reg. ANVISA: 10344119007
Tel.: +55 (47) 3454-2200
Hecho en Brasil

  +55 (47) 98882-8351
fabrica@villevie.com www.villevie.com
Manufacturer:
DENTALVILLE DO BRASIL LDA - CNPJ: 01.101.363/0001-86
Rua Adv. Miguel Ceral, 645 - Nova Brasília-Joinville-SC 89214-610
Resp. Técnico: Aldo Castellani - CRO-SC 13.400.397 13°R
Reg. ANVISA: 10344119007
Phone: +55 (47) 3454-2200
Made in Brazil